


## Mode d'emploi simplifié de l'oscilloscope numérique HAMEG 507

### 1. Pour une utilisation analogique

*réglages sans aucune connexion*

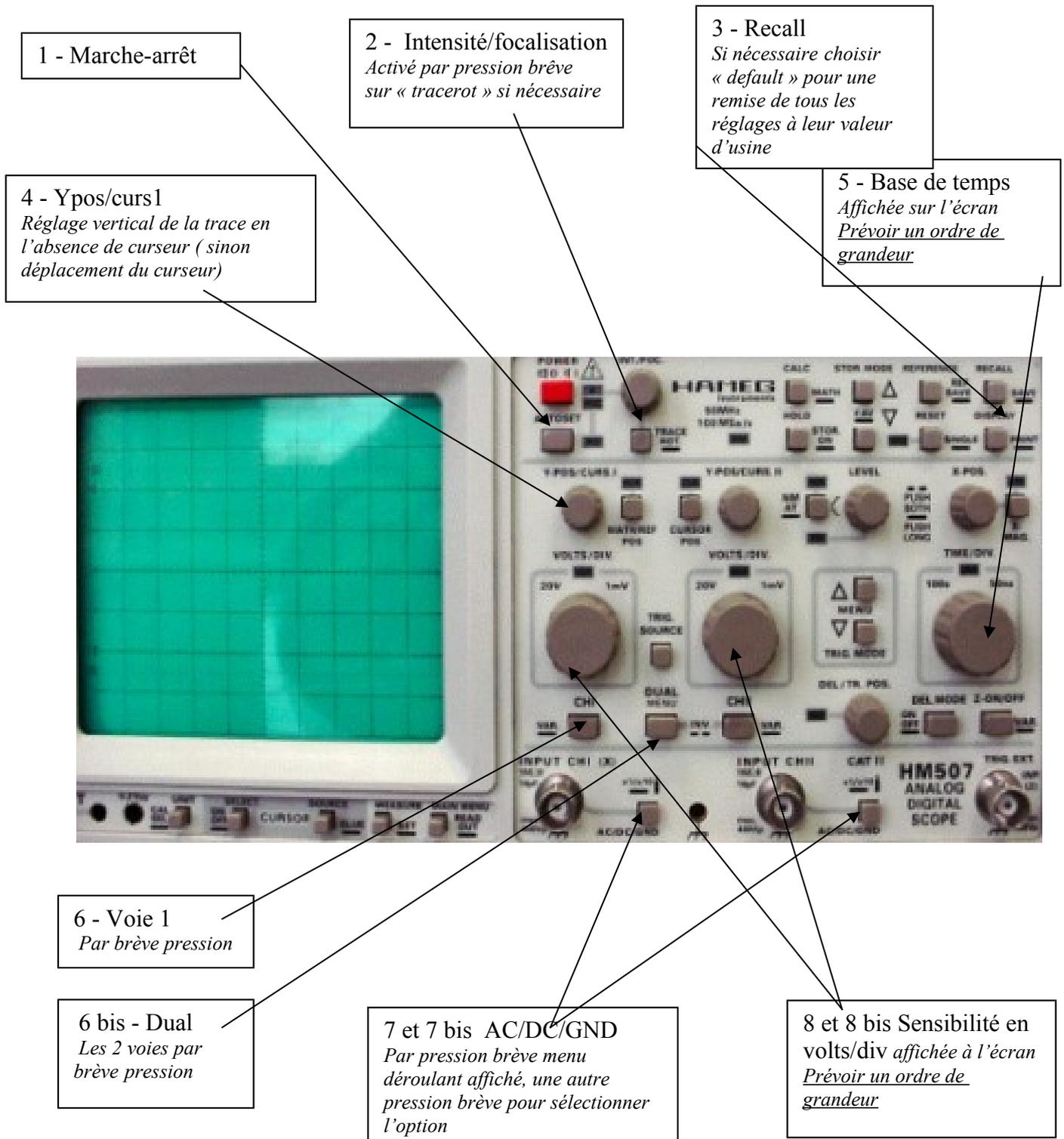

## 2. Pour une utilisation en numérique


activer :

1 - « Hold /stor on »  
Un appui prolongé pour passer du mode analogique au mode numérique

2 - « menu »  
Choisir DC ou AC suivant le cas étudié

3 - « NM/AT »  
Un appui long permet de passer du mode de déclenchement automatique au déclenchement normal ( NM affiché)  
Une brève pression permet de choisir le front de déclenchement

4 - « level »  
Niveau de déclenchement : choisir 30% de la tension max

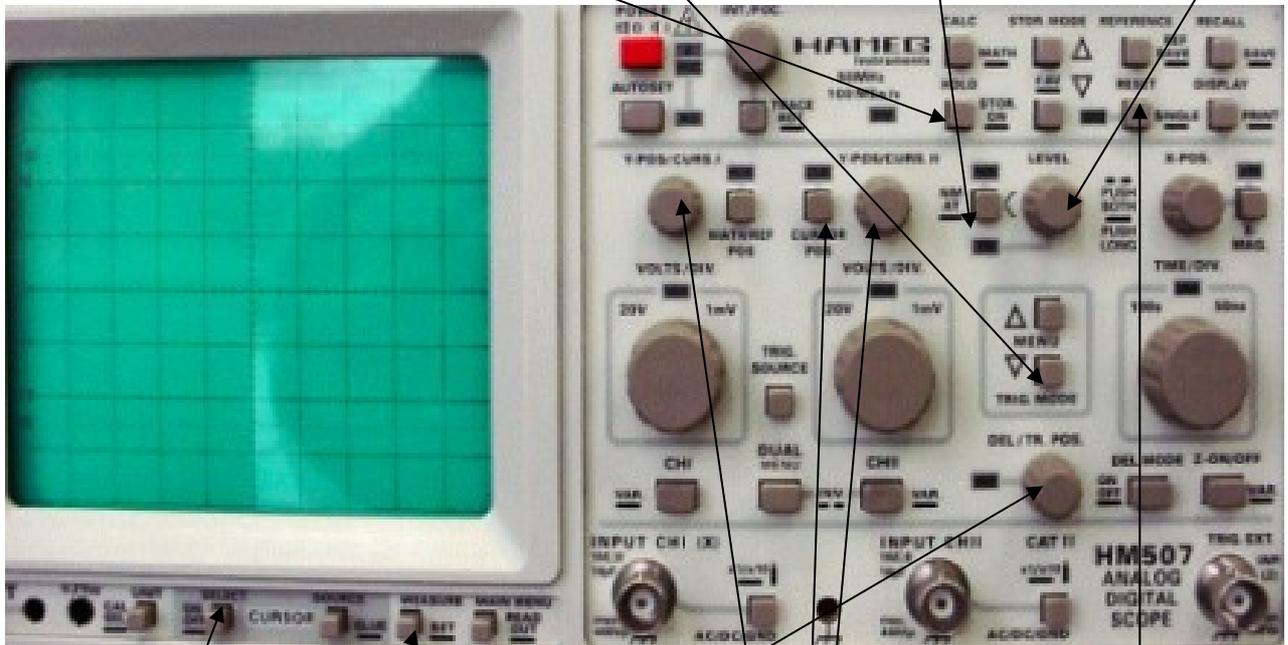

7- Curseur on/off

8 - Choix des curseurs (par exemple At)

5 - « DEL/TR POS »  
En tournant le bouton vers la droite, permet de fixer la date du déclenchement ( choisir 10% du temps max)

6 - « reset/single »  
6.1 Pression prolongée : active le mode single (sgl)  
6.2 Pression brève : permet l'acquisition de l'événement après avoir réalisé les connexions

9 - Déplacement des curseurs  
Si « cursor position » activé, curs1 et curs 2 peuvent être déplacés.

### 3. Les indications de l'écran HM507

